

## Afleverbon (92967)

### Afleveradres :

Amphia Ziekenhuis  
Molengracht 21  
4818 CK BREDA  
Nederland

### Afleveradres:

Human Protection BV  
Schijfstraat 13  
5061 KA Oisterwijk

### Extra info:

Afdeling: VMD K.069.

Referentie: C185061

Patiëntnaam: Gal-5612328

Onderstel: PB526IIPR-00110. Bed ophalen en reinigen in kelder, ruimte vieze huur hulpmiddelen. Na reiniging/controle het bed brengen naar VMD K.069.


### Artikelen

FeelSafe Pro tent (BT015-01590)

### Accessoires

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 09-04-2026

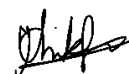

yolanda

Checklist	Ja	Nee
<b>Onderstel: barcode</b> Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is	X	
<b>Onderstel: algemeen</b> Controleren op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings) stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel	X	
<b>Onderstel: wielen</b> Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes	X	
<b>Onderstel: remmen</b> Controleren op functionaliteit	X	
<b>Onderstel: bedverstelling</b> Controle functioneren hoofd- en voeten-eindverstelling en hoog/laag verstelling	X	
<b>Onderstel: Borgpen motor</b> Controle of borgpen hoog/laag motor goed vast zit. (beide borgringen zijn aanwezig en zitten evenwijdig op de pen bevestigd)	X	
<b>Onderstel: kabel HL motor</b> Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5 cm van de grond hangt	X	
<b>Onderstel: bekabeling</b> Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat	X	
<b>Onderstel: CPR-functie</b> Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde gaat omlaag bij inknijpen hendel)	X	
<b>Onderstel: netsnoer</b> Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent	X	
<b>Onderstel: handbediening</b> Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring	X	
<b>Opbouwframe: schroeven</b> Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn	X	
<b>Opbouwframe: stootrubbers</b> Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten	X	

Checklist	Ja	Nee
<b>Schuim</b> Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn	X	
<b>Sleutel van de handbediening</b> Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt	X	
<b>Tent: barcode</b> Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is	X	
<b>Tent: Doek (nylon)</b> Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes.	X	
<b>Tent: gaas</b> Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen	X	
<b>Tent: ritsen en runners</b> Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband	X	
<b>Tent: kliksluitingen</b> Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten	X	
<b>Opdekmatras (zwart)</b> Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes	X	
<b>Comfortmatras (blauw)</b> Controleren op vlekken en vieze geurtjes	X	
<b>Controle plaatsing tent op onderstel</b> Controleren of de tent op de juiste wijze op het onderstel is geplaatst: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel	X	
<b>Gebruiks-aanwijzingen</b> Controleren of deze aanwezig zijn: - Gebruikershandleiding - Beknopte nalooplijst - Bij Elbur, ontgrendelingsleutel	X	

## Opmerkingen