

Afleverbon (92604)

Afleveradres :

Noordwest Ziekenhuisgroep lok. Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD ALKMAAR

Afleveradres:

Human Protection BV
Schijfstraat 13
5061 KA Oisterwijk

Extra info:

Afdeling: kelder

Referentie: C184060

Patiëntnaam: Zwa-0933074

Bijbehorend bed : FeelSafe Pro Onderstel PB528PR-00112 | PPU wissel 311: staat in de Bedbuffer bij afdeling 311/ingang BCU. Hier ook tentwissel/reiniging en bed achter laten. Als we bijna bij het zkh zijn bellen met `DD seindrager neurologie' op 088-0855639. PPU wissel overige afdelingen: staat in de kelder, Hier ook tentwissel/reiniging en bed achter laten.


Artikelen

FeelSafe Pro tent (BT015-00468)

Accessoires

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 24-03-2026

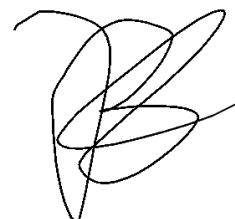

Janneke

Checklist	Ja	Nee
Onderstel: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is	X	
Onderstel: algemeen Controleren op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings) stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel	X	
Onderstel: wielen Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes	X	
Onderstel: remmen Controleren op functionaliteit	X	
Onderstel: bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeten-eindverstelling en hoog/laag verstelling	X	
Onderstel: Borgpen motor Controle of borgpen hoog/laag motor goed vast zit. (beide borgringen zijn aanwezig en zitten evenwijdig op de pen bevestigd)	X	
Onderstel: kabel HL motor Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5 cm van de grond hangt	X	
Onderstel: bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat	X	
Onderstel: CPR-functie Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde gaat omlaag bij inknijpen hendel)	X	
Onderstel: netsnoer Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent	X	
Onderstel: handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring	X	
Opbouwframe: schroeven Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn	X	
Opbouwframe: stootrubbers Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten	X	

Checklist	Ja	Nee
Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn	X	
Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt	X	
Tent: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is	X	
Tent: Doek (nylon) Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes.	X	
Tent: gaas Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen	X	
Tent: ritsen en runners Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband	X	
Tent: kliksluitingen Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten	X	
Opdekmatras (zwart) Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes	X	
Comfortmatras (blauw) Controleren op vlekken en vieze geurtjes	X	
Controle plaatsing tent op onderstel Controleren of de tent op de juiste wijze op het onderstel is geplaatst: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel	X	
Gebruiks-aanwijzingen Controleren of deze aanwezig zijn: - Gebruikershandleiding - Beknopte nalooplijst - Bij Elbur, ontgrendelingsleutel	X	