

Afleverbon (92647)

Afleveradres :

UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT
Nederland

Afleveradres:

Human Protection BV
Schijfstraat 13
5061 KA Oisterwijk

Extra info:

Afdeling: D3 of C3

Referentie: C184155

Patiëntnaam: Min-7468969

Bijbehorend bed : FeelSafe Pro Onderstel PB528PR-00160 | PPU wissel, cijfercode 1049: Bed ophalen op aangegeven afdeling, reinigen op het liftenplein van desbetreffende afdeling. Terugbrengen naar D3 of C3.


Artikelen

FeelSafe Pro tent (BT015-00471)

Accessoires

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 24-03-2026

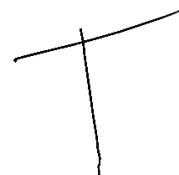

Checklist	Ja	Nee
Onderstel: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		X
Onderstel: algemeen Controleren op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings) stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel		X
Onderstel: wielen Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes		X
Onderstel: remmen Controleren op functionaliteit		X
Onderstel: bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeten-eindverstelling en hoog/laag verstelling		X
Onderstel: Borgpen motor Controle of borgpen hoog/laag motor goed vast zit. (beide borgringen zijn aanwezig en zitten evenwijdig op de pen bevestigd)		X
Onderstel: kabel HL motor Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5 cm van de grond hangt		X
Onderstel: bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat		X
Onderstel: CPR-functie Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde gaat omlaag bij inknijpen hendel)		X
Onderstel: netsnoer Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent		X
Onderstel: handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring		X
Opbouwframe: schroeven Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn		X
Opbouwframe: stootrubbers Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten		X

Checklist	Ja	Nee
Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn		X
Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt		X
Tent: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is		X
Tent: Doek (nylon) Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes.		X
Tent: gaas Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen		X
Tent: ritsen en runners Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband		X
Tent: kliksluitingen Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten		X
Opdekmatras (zwart) Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes		X
Comfortmatras (blauw) Controleren op vlekken en vieze geurtjes		X
Controle plaatsing tent op onderstel Controleren of de tent op de juiste wijze op het onderstel is geplaatst: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel		X
Gebruiks-aanwijzingen Controleren of deze aanwezig zijn: - Gebruikershandleiding - Beknopte nalooplijst - Bij Elbur, ontgrendelingsleutel		X

Opmerkingen

Bed nog in gebruik, niet uitgevoerd, op tineke